

HYGIENE & MAINTENANCE

Create it

(扫描二维码 关注我们)



内部培训资料
仅供公司员工及代理商下载使用

www.nsk-shanghai.com



HYGIENE & MAINTENANCE
牙科手机维护保养系统

NSK

iCare

自动注油机

iCare是一种新的标准的手机维护系统。拥有时尚轻巧的机身,使用简单,功能多样,可以达到清洁和润滑。根据手机类型调整适量的溶液体积,按下按钮就开始维护。卡盘清洁系统保持卡盘清洁,清洁选择模式允许你按照实际情况选择清洁时间,以达到全面维护。根据时尚又轻巧的机身,iCare既节约了空间又与你的工作环境协调一致。

优点

- 根据手机类型调整溶液体积 (高速手机、低速手机)
- 通过简单操作可以清洁和润滑
- 卡盘清洁功能清洁和润滑
- 清洁选择模式可以去除多余的油
- 集合大油桶 (1.2升) 减少再注负担



根据手机类型调整合适的溶液体积

根据高速和低速手机调整合适的溶液体积,保证按下按钮后精确和润滑。




溶液槽

iCare大溶液槽可以容纳1.2升,允许一次放入一个1升的维护溶液瓶,减少频繁再装。封闭式喷嘴清洁,而且容易再替换。




高速手机

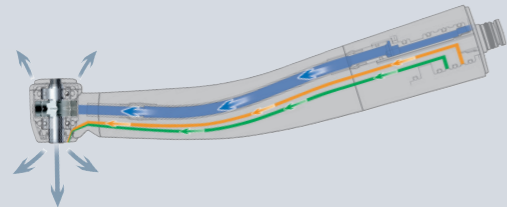

使用iCare注油高速手机。

低速手机

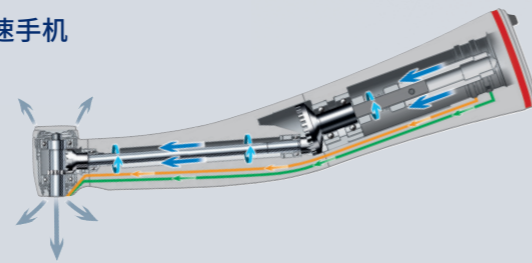

内部转动注油让传动齿轮润滑更彻底。

iCare 标准套

双标准端口 + 双循环端口

型号: iCare C2 Type (230V) 订货编号: Y1002792



配套内容

- iCare 主机
- HP过滤器
- 吸油棉
- 卡盘清洗转接口
- iCare维护油 (1升)
- 油瓶喷嘴
- 电源线
- 喷雾过滤装置
- 空气管

规格

- 电源: AC 100-240 V 50/60 Hz
- 尺寸: W 280 × D 240 × H 350 mm
- 空气压力: 0.5-0.6 MPa (5.0-6.0 kgf/cm²)
- 溶液槽容量: 1.2 L
- 重量: 6.5 kg (C2 Type / C3 Type)

- 4孔型接口 ● 需要空气管道 (5.0-6.0 kgf/cm²)

iCare 注油接口

型号	订货编号	
PTL Adaptor	Z257010	● 用于 NSK 高速手机的 PTL-CL-LED 接口
B2/M4 Adaptor	T904	● 用于 标准4孔/标准2孔 高速手机
KV Adaptor	Z257020	● 用于 KaVo 高速手机的 MULTIflex LUX 接口
SR Adaptor	Z257023	● 用于 Sirona 高速手机的 Quick 接口
WH Adaptor	Z257021	● 用于 W&H 高速手机的 Roto Quick 接口
BA Adaptor	Z280022	● 用于 Bien-Air 高速手机的 Unifix 接口
F-Type Adaptor	Z280042	● 用于 ENDO-MATE DT / TC2 的机头

安装其他手机注油接口请联系经销商

维护保养用润滑油

型号: 维护保养用润滑油 订货编号: Y1002783

- 1升



iCare

喷雾过滤器装置 12片/套		Y900159
吸油棉 10条		U433135
空气过滤器		U508352

夹头喷嘴		Z257301
HP 过滤器 200条		U1120118

NSK中国分公司
上海弩速克国际贸易有限公司

邮编: 200051
中国上海市长宁区紫云路421号 SOHO天山广场T1-702室
电话: 021-62527272 传真: 021-62527855